

# TERMOMETRÍA I.R. AVANZADA



# DOTORY

TERMOMETRO DIGITAL DE CONTACTO MEDIANTE INFRARROJOS



- ✓ *Termómetro Digital I.R. de contacto*
- ✓ *Sensor de infrarrojos de última generación*
- ✓ *Confortable y fácil de usar.*
- ✓ *LCD grande de fácil lectura*
- ✓ *Exacto y reproducible.*
- ✓ *Diseño anatómico y compacto.*
- ✓ *Lectura corporal en 3-5 segundos.*
- ✓ *Rango desde 20°C a 42,2 °C.*
- ✓ *Exactitud  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  ( 32°C a 42,2°C )*
- ✓ *Memoria última lectura*
- ✓ *No precisa filtros.*
- ✓ *Batería de Litio ( 6.000 lecturas )*
- ✓ *Clínicamente testado.*
- ✓ *Auto apagado al minuto de usarse.*
- ✓ *CE directiva 93/42/EEC (MDD).*
- ✓ *Garantía de 1 año.*



CE 0120



**Vmedica**  
VICR  
electromedicina



"Mediante la aplicación en la medición, de un algoritmo con una regresión lineal múltiple, se consigue una mayor exactitud y reproducibilidad"



# HuBDIC

*Human Buddy Design Idea Company*

- ✓ **La tercera marca mundial, en termometría de infrarrojos, no precisa de filtros como la mayoría de estos termómetros.**
- ✓ **Alta exactitud ( ± 0,2°C ). 12 medidas por bit de medida, mínimo 3 veces en modo FrontHead. Control automático y completo de la calibración.**
- ✓ **Sensor IR de última generación, 4 veces más duradero que los de la competencia, 20.000 medidas, frente a 4.000 de otras marcas de IR.**
- ✓ **No precisa costosos filtros desechables, como la mayoría de los termómetros de infrarrojos de oreja.**
- ✓ **Uso cómodo y fácil: (2°C a 42°C) El modo de lectura de la temperatura corporal va desde Neonato a Adulto, mediante el sistema menos agresivo posible. Incluso permite la lectura de la temperatura sin despertar al niño.**
- ✓ **Medida en 3 a 5 segundos, remarcable alta velocidad comparado con otras marcas. Listo para una nueva medida en solo 0,03 seg.**
- ✓ **Seguro: mediante el sistema de auto apagado, se alarga la vida del equipo y de las baterías. permite alrededor de 6.000 lecturas.**
- ✓ **Dispone de controles acústicos de fácil interpretación.**
- ✓ **Uso clínico: Hospitales, Hogar, Geriátricos, etc.**
- ✓ **Venta en Farmacias.**

## DOTORY


TERMOMETRO DIGITAL DE CONTACTO MEDIANTE INFRARROJOS

**Dotory** es un termómetro digital innovador de última generación con una alta tecnología de infrarrojos, que permite un uso y una precisión clínica. Este nuevo tipo de termómetro proporciona tranquilidad al usuario, al tomar a temperatura de una forma más suave y agradable.

### Principios básicos de medición

Según estudios clínicos realizados, la medida de la temperatura de la sangre en una arteria principal es la manera más precisa de leer la temperatura corporal. Este termómetro digital de infrarrojos, está diseñado para medir la temperatura en la superficie de la piel, por encima de la arteria temporal, la arteria más importante de la cabeza, realizando 12 lecturas por segundo, en cada medida acústica reportada y en un intervalo que va de 3 a 5 segundos..

**Dotory** garantiza una medición rápida, fácil y segura con un grado de precisión clínica y todo ello mediante un uso fácil, que evita los errores de muestreo.

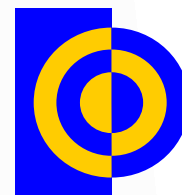

**VICA MEDICA S.L.**

C/ Islas Canarias, 1 Pol. Ind. Fuente del Jarro - 2ª Fase  
46988 PATERNA ( Valencia )  
Tfno: 96 134 33 49 Fax: 96 134 38 93  
e-mail : vicamedica@vicamedica.es