


HuBDIC

Thermo Buddy

Control Térmico Integral



Termómetro I.R. de contacto
Confortable y fácil de usar.
LCD retroiluminado de fácil lectura
Exacto y reproducible.
Diseño anatómico y compacto.
Lectura corporal en 3 segundos.
Medida de temperatura ambiente.
Rango desde 0°C a 100°C.
Memoria para 8 lecturas.
No precisa filtros.
Clínicamente testado.
Auto apagado al minuto de no usarse.

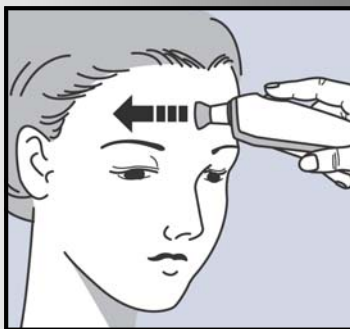

La medición en modo FH mediante I.R. 12 veces por segundo, tres veces consecutivas, permiten una medida de la temperatura corporal, precisa, exacta y reproducible, sin necesidad de filtros y en menos de tres segundos. Testado clínicamente.

Thermo Buddy
Digital Infrared Forehead Thermometer

En modo LH, permite la medición en 1 seg. de la temperatura ambiente, biberones, agua del baño, alimentos, etc. Permite un control térmico absoluto del entorno y unas aplicaciones termométricas completas que lo hacen enormemente útil.



CE 0120

VICA
medica
electromedicina

"Mediante la aplicación en la medición, de un algoritmo con una regresión lineal múltiple, se consigue una mayor exactitud y reproducibilidad"



HuBDIC

Human Buddy Design Idea Company

- ✓ **La tercera marca mundial, en termometría de infrarrojos, no precisa de filtros como la mayoría de estos termómetros.**
- ✓ **Alta exactitud ($\pm 0,1^{\circ}\text{C}$). 12 medidas, 3 veces en mod FH. Control automático y completo de la calibración.**
- ✓ **Sensor IR, 4 mas veces mas duradero que los de la competencia, 20.000 medidas, frente a 4.000 de otras marcas de IR.**
- ✓ **Multi uso: (0°C a 100°C) Dos modos de lectura FH (Corporal) y LH (General). Mide las temperaturas de la practica diaria, biberones, cuartos de baño, baño, estancias y tambien la temperatura corporal desde neonato a adulto, mediante el modo menos agresivo posible. permite la lectura de la temperatura sin despertar al niño.**
- ✓ **Mide en un segundo, remarcable alta velocidad comparado con otras marcas. Listo para una nueva medida en 0,03 seg.**
- ✓ **Seguro: mediante el sistema de auto apagado, se alarga la vida del equipo y de las baterías.**
- ✓ **Auto iluminado, permite usarlo con escasa luz ambiental. Dispone de controles acusticos de facil interpretación.**
- ✓ **Uso variado: Hospitales, Hogar, Geriatricos, etc.**
- ✓ **Venta en Farmacias y en centros hospitalarios.**

Thermo Buddy

Thermo Buddy es un termómetro digital innovador de última generación con una alta tecnología de infrarrojos, que permite un uso y una precisión clínica. Este nuevo tipo de termómetro proporciona tranquilidad al usuario, al tomar la temperatura de una forma más suave y agradable.

Principios básicos de medición

Según estudios clínicos realizados, la medida de la temperatura de la sangre en una arteria principal es la manera mas precisa de leer la temperatura corporal. Este termómetro digital de infrarrojos en modo FH, está diseñado para medir la temperatura en la superficie de la piel, por encima de la arteria temporal, la arteria más importante de la cabeza, realizando 12 lecturas por segundo, en tres medidas de 1 segundo.

Thermo Buddy garantiza una medición rápida, fácil y segura con un grado de precisión clínica y todo ello mediante un uso fácil, que evita los errores de muestreo.



VICA MEDICA S.L.

C/ Islas Canarias, 1 Pol. Ind. Fuente del Jarro - 2ª Fase
46988 PATERNA (Valencia)
Tfono: 96 134 33 49 Fax: 96 134 38 93
e-mail : vicamedica@vicamedica.es

